

DIB

DIBカテーテルシステムは【より快適で より安全】なコンセプトを込めて薬液持続注入器の画期的なシンプル構造を構築し活用されています。



DIB[®] CATHETER



DIB International Co.,Ltd.

Visible !!
Measurable !!
Comfortable !!
 見えます! 量れます! 安心です!

Best Choice—Since 1989— DIB® カテーテル

承認番号20100BZZ01202000

〔スライドシェル〕

- 1 注入器の薬液残量を5mL単位で量れます。
- 2 薬液量によりスライドするコンパクト設計です。
- 3 薬液注入量を視覚的に確認でき、患者に精神的解放感をもたらします。



■ スライドシェルタイプ



スライドシェル				
製品番号	タイプ	カラー	流速 mL/hr	最大 充填量
154242	HS 50mL-24hr	ブルー	2	50mL
154482	HS 50mL-48hr	グリーン	1	50mL
110022	HS100mL-2mL/hr	ブルー	2	100mL
120022	HS200mL-2mL/hr	ブルー	2	200mL
120042	HS200mL-4mL/hr	イエロー	4	200mL

●1箱10セット入り ●エチレンオキシドガス滅菌済み ●ポーチ付

〔ハードシェル〕

ディヴカテーテルは、シリコンバルーンの収縮力を応用し外部動力が不要な薬液注入器として開発、製造を始めて20年を迎えようとしております。その間、多くの納入実績を重ね、病院関係者の皆様の多くのご意見をいただき、シンプルで信頼できる構造へと改良を積み重ねて今日に至っております。

■ ハードシェルタイプ



三方活栓付き・40mL				
製品番号	タイプ	カラー	流速 mL/hr	最大 充填量
143120	40mL-12hr	イエロー	3.3	40mL
143240	40mL-24hr	ブルー	1.7	
143480	40mL-48hr	グリーン	0.83	
143720	40mL-72hr	レッド	0.55	

●1箱10セット入り ●エチレンオキシドガス滅菌済み ●ポーチ付




三方活栓付き・50mL				
製品番号	タイプ	カラー	流速 mL/hr	最大 充填量
153120	50mL-12hr	イエロー	4	50mL
153240	50mL-24hr	ブルー	2	
153480	50mL-48hr	グリーン	1	
153960	50mL-96hr	レッド	0.5	

●1箱10セット入り ●エチレンオキシドガス滅菌済み ●ポーチ付

- 1 簡単操作で持続注入可能です。(通常のシリンジで簡単充填)
- 2 本体は軽く、コンパクト設計。
- 3 バルーンの収縮力を利用のため電氣的トラブルが皆無です。
- 4 耐薬品性の高い本体とクローズドシステムにより感染の危険性がありません。

3Wayフローソフトシェルタイプ

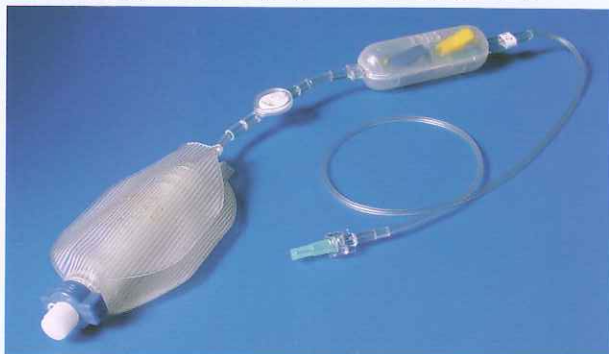

3Wayフロー・ソフトシェル流量可変タイプ			
製品番号	タイプ	流速mL/hr	最大充填量
125246	3Wayフロー6 (2-4-6)	2mL・4mL・6mL	200mL
135235	3Wayフロー5 (2-3-5)	2mL・3mL・5mL	300mL

●1箱10セット入り ●エチレンオキサイドガス滅菌済み ●ポーチ付

3Wayフロースライドシェルタイプ



3Wayフロー・スライドシェル流量可変タイプ			
製品番号	タイプ	流速mL/hr	最大充填量
126246	HS3Wayフロー6 (2-4-6)	2mL・4mL・6mL	200mL

●1箱10セット入り ●エチレンオキサイドガス滅菌済み ●ポーチ付

ユーロモデル

3Dソフトシェル (ユーロモデル) 三方活栓付				
製品番号	タイプ	カラー	流速 mL/hr	最大充填量
053240	S50mL-24hr	ブルー	2	50mL
053480	S50mL-48hr	グリーン	1	
053960	S50mL-96hr	レッド	0.5	

◎ソフトパック入り+エクステンションチューブ500mm付
●1箱10セット入り ●エチレンオキサイドガス滅菌済み ●ポーチ付

(3Dソフトシェル)

国際特許取得済


- 1 最大充填量200mLまで、充填量に応じた大きさで、軽量コンパクトに臨床使用できます。
- 2 ソフトシェルにより、使用後の焼却及び廃棄処分のコストが安価で、環境に対する配慮がなされた携帯型ディスプレイ注入ポンプです。
- 3 他社の一般的なハードプロテクタータイプに比較して、硬いエッジが無く、ネクローゼの心配がありません。

3Dソフトシェルタイプ



3Dソフトシェル				
製品番号	タイプ	カラー	流速 mL/hr	最大充填量
120011	VD200mL-1mL/hr	グリーン	1	200mL
120021	VD200mL-2mL/hr	ブルー	2	
120041	VD200mL-4mL/hr	イエロー	4	
130061	VD300mL-6mL/h	ホワイト	6	300mL

●1箱10セット入り ●エチレンオキサイドガス滅菌済み ●ポーチ付

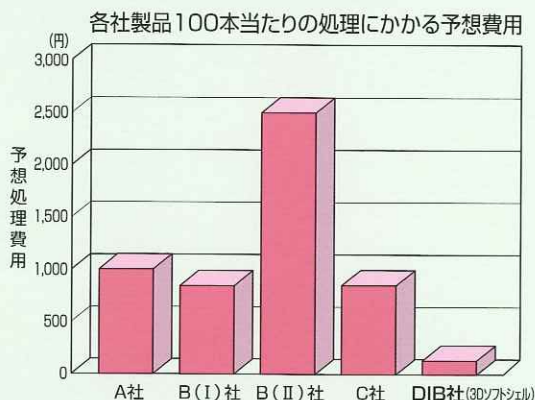

医療廃棄処理コスト 注意) 医療廃棄物処理料→@3,000円/60L目安とした

メーカー	製品1本当たりの体積 (mL)	60L医療廃棄物用トレイに入れた時の製品1本当たりの予想ロス分 (mL)	製品100本当たりの体積 (mL)	製品100本当たりの処理費用 (円)
A社	155	46.5	20,150	1,007.5
B(I)社	128	38.4	16,640	832.0
B(II)社	383	114.9	49,790	2,489.5
C社	131	39.3	17,030	851.5
DIB社 (3Dソフトシェル)	20	2.0	2,200	110.0

DIBカテーテル専用オプション



一般的名称：滅菌済み輸液セット（DIBカテーテル用薬液充填器）
承認番号：15900BZZ01154000

製品番号	品名	包装単位
090035	DIBセット	10本/箱
090735	DIBセット(L-700)	10本/箱

●エチレンオキシドガス滅菌済



オプションポーチ

製品番号	タイプ	包装単位
090031	オプションポーチ S メッシュ	10枚/箱



一般的名称：その他の医薬品注入器（専用延長管）
承認番号：16100BZZ0135000

製品番号	タイプ	内径mm	包装単位
090040	L=500mm	0.7	10本/箱

●エチレンオキシドガス滅菌済み
◆その他の長さもご注文承ります

わたくしたちは

- 1 簡単操作
- 2 低コスト、エコロジカル設計
- 3 シンプル高品質構造

をコンセプトに研究開発を推進します。



参考文献〈DIBカテーテルシステム〉

1. 越智元郎、倉敷俊夫：術後疼痛に対する硬膜外ブプレノルフィンへの適投与量に関する検討 麻酔36：1093-1099、1987
2. 松本真希、並木昭義：硬膜外持続注入法のペインクリニックにおける応用 ペインクリニック11：155-159、1990
3. 塩健二郎、松永万鶴子他：術後痛（開胸術痛）への硬膜外PCAの効果 ペインクリニック11：175-179、1990
4. 鈴木太、小川節郎：開腹術後疼痛へ硬膜外PCAの効果 ペインクリニック11：180-185、1990
5. 増田純一他：肛門疾患手術後疼痛に対する硬膜外エトゾロン鎮痛効果 臨床麻酔14：645-649、1990
6. 田口仁士、美馬正彦、内田盛夫：モルヒネ、フェンタニール及びリドカインの硬膜外投与による鎮痛作用麻酔40：721-727、1991
7. 野中明彦、中野忍、熊沢光生：硬膜外大量フェンタニール麻酔の検討 麻酔41：43-48、1992
8. 弘田博子、吉岡齊、長谷浩吉：ディスプレイ持続注入器を使用した硬膜外ブプレノルフィンによる術後疼痛管理 臨床麻酔15：403-405、1991
9. 櫻川恵吾、中西明子、曾我幸弘、藤井昭芳、木村恒人、浜野恭一：ディスプレイ持続注入器を用いた硬膜外持続注入法による術後疼痛管理について 日本臨床外科医学会雑誌54巻7号：58-62、1993
10. 中保利通、佐藤港、漆山浩光、江島豊、菅瀬敦、筆田廣登、塩澤茂：ディスプレイ携帯式持続注入器を用いた硬膜外モルヒネ投与による術後疼痛の検討 日本臨床麻酔学会誌 Vol.13.No.6.537-541、1993
11. 木下幸大、井上道夫、本間豊彦、遠藤三樹男、三宅有、佐藤和彦、ディスプレイ持続注入器を用いた簡易PCAシステム 日本臨床麻酔学会誌 Vol.13.No.6.563-569、1993
12. 鈴木利保、瀧口守：麻酔科医からみたペインクリニックの実態—携帯型ディスプレイ持続注入器を用いた硬膜外ブロックを中心として—臨床外科51(12)：1427-1432、1996
13. 青木正：持続注入DIBを用いた硬膜外麻酔 分娩と麻酔76：1996.12
14. 木下幸大：ディスプレイ持続注入器、可撓性リザーバー、一方弁を用いた簡易PCAシステム 麻酔44No.7：1037-1040、1995
15. 加藤啓一、種田益造、内山睦、田島夕紀子、小倉明、森田靖、日本赤十字社医療センター麻酔科：硬膜外カテーテル径がディスプレイ持続注入器流量に及ぼす影響—DIBカテーテル（50mL-24hrタイプ）での検討—臨床麻酔Vol.21/No.10(1997-10)

●消耗品は滅菌済みのディスプレイです。再滅菌、再使用はしないでください。
●仕様デザインは改良、改善のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

発売元
Dib 株式会社 デイヴィンターナショナル

本社 東京都文京区小石川1丁目1-8 〒112-0002 TEL (03)5684-5684 FAX (03)5684-5686
湘南営業所 神奈川県伊勢原市高森6丁目15-6 〒259-1114 TEL (0463)95-8481 FAX (0463)95-8482
大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島7-2-2 〒532-0011 TEL (06)6101-0307 FAX (06)6101-0308

製造販売元 三矢メディカル株式会社